

Clear Aligner SET

OLS-1500-SET6

Inhalt · Content · Volume · Contenido:

OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505, OLS-1506,
OLS-1510, OLS-1520



B-0040-19-BR-Clear Aligner 2019



FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY



NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE



FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY

CLEAR
Aligner


NEU · NEW
2019



Clear Aligner Zangen



Clear Aligner Pliers
Clear Aligner Pinces
Clear Aligner Alicates

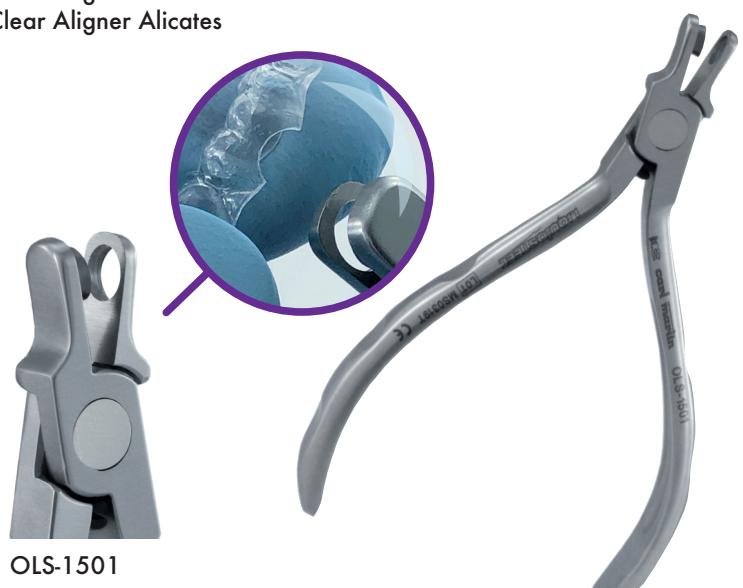

OLS-1501



OLS-1502



OLS-1505

Clear Aligner Zangen



Clear Aligner Pliers
Clear Aligner Pinces
Clear Aligner Alicates



OLS-1506



OLS-1510



OLS-1520

Vertikalzange

Spezialzange zur Erzeugung einer Überkorrektur einer Rotation. Weiterhin können mit der Vertikal Zange In-Out-Diskrepanzen beseitigt werden.

Vertical Plier

Special plier for over-correction of a rotation. Furthermore the vertical plier can eliminate in-and-out discrepancies.

Pince Verticale

Pince spéciale pour la correction excessive d'une rotation. De plus, la pince verticale peut éliminer les disparités d'entrée et de sortie.

Alicate Vertical

Alicates especiales para la corrección excesiva de una rotación. Además, el alicate vertical puede eliminar las discrepancias de entrada y salida.

Punkt-Erhebungszange

1,5mm

Spezialzange zur Erzeugung punktförmiger Erhebungen im Aligner. Ermöglicht die selektive Aktivierung, um den Druck auf die Einzelzähne zu erhöhen.

Point elevation plier

1,5mm

Special plier for creating punctiform elevations in the aligner. Allows a selective activation, which increases the pressure on the individual teeth.

Pince d'élevation de point

1,5mm

Pince spéciale pour créer des élévations ponctuelles dans l'alignement. Permet une activation sélective, ce qui augmente la pression sur les dents individuelles.

Alicate de elevación de punto

1,5mm

Alicate especial para crear elevaciones puntiformes en el alineador. Permite una activación selectiva, lo que aumenta la presión sobre los dientes individuales.

Reverse Zange

Spezialzange zum Invertieren von Erhebungen im Aligner.

Reverse plier

Special plier for inverting elevations in the aligner.

Pince Inversée

Pince spéciale pour inverser les élévations dans l'alignement.

Alicate Inverso

Alicate especial para elevaciones invertidas en el alineador.

Lochstanze

6mm, TC Einlagen

Lochstanze zur Ausstanzung halbmondförmiger Aussparungen im Bereich von Brackets oder Knöpfchen. Auch zur Entfernung überstehender Kunststoffkanten um Verletzungen am Weichgewebe zu vermeiden.

Hole-Punch

6mm, TC inserts

Plier for punching out half-moon recesses in the area of brackets or bonded buttons. Also for removing protruding plastic edges to avoid damage to the soft tissue.

Perforateur

6mm, TC inserts

Pince pour percer des creux en demi-lune dans la zone des crochets ou des boutons collés. Aussi pour enlever les bords en plastique saillants afin d'éviter d'endommager les tissus mous.

Perforadora

6mm, TC Carbur tungsten

Alicate para perforar huecos de media luna en el área de los soportes o botones unidos. También para eliminar los bordes de plástico que sobresalen para evitar daños en el tejido blando.

Stanze tropfenform

TC Einlagen

Spezialzange zum Ausstanzen einer tropfenförmigen Einkerbung am Rand des Aligners. Die Tropfenform ermöglicht das sichere Einhängen elastischer Gummizüge - auch für den Patienten.

Punch drop shape

TC inserts

Plier to add a drop shaped notch at the gingival margin. The drop shape enables the secure attachment of elastics - even for the patient.

Perforateur forme de goutte

TC inserts

Pince pour ajouter une entaille en forme de goutte au bord gingival. La forme en goutte permet la fixation sécurisée d'élastiques, même pour le patient.

Perforadora forma de gota

TC Carburotungsten

Alicate para agregar una muesca en forma de gota en el margen gingival. La forma de caída permite un acoplamiento seguro de los elásticos, incluso para el paciente.

Horizontalzange

Spezialzange zur Erzeugung von horizontalen Vertiefungen für individuellen Wurzeltorque. Ermöglicht auch die Verbesserung der Retention von Alignern oder Retainern.

Horizontal plier

Special plier for creating horizontal recesses for individual root torque. Also allows to improve the retention of aligners or retainers.

Pince Horizontale

Pince pour percer des creux en demi-lune dans la zone des crochets ou des boutons collés. Aussi pour enlever les bords en plastique saillants afin d'éviter d'endommager les tissus mous.

Alicate Horizontal

Alicate para perforar huecos de media luna en el área de los soportes o botones unidos. También para eliminar los bordes de plástico que sobresalen para evitar daños en el tejido blando.